

PHYSIOMER®

KEELSPRAY - HALSSPRAY SPRAY POUR LA GORGE

PHYSIOMER® KEELSPRAY werkt binnen 3 minuten. Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

- Verlicht keelpijn
 - Helpt bacteriën en virussen te verwijderen
 - Verzacht de keel
- Met zeeewater, propolis en essentiële oliën.
Honing- en citroensmaak.

Lees aandachtig de bijsluiter voor gebruik van de **PHYSIOMER® Keelspray**.

- De bijsluiter bevat belangrijke informatie over uw behandeling.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later nog nodig.
 - Heeft u vragen? Neem contact op met uw arts of apotheker.
 - Raadpleeg uw dokter indien de symptomen erger worden of langer dan 10 dagen aanhouden.

Wanneer de keel wordt blootgesteld aan infectiebronnen zoals virussen of bacteriën kan dit leiden tot pijnlijke ontstekingen zoals faryngitis (ontsteking van de keelholte) of tonsillitis (ontsteking van de amandelen). De ontstekingsreactie wordt gekenmerkt door een toename van vloeistoffen en immunocellen in het slijmvlies. De immunocellen triggeren de zwelling van het slijmvlies en veroorzaken de symptomen van keelpijn.

WAT IS PHYSIOMER® Keelspray?

Physiomer® Keelspray verlicht, verzacht en zuivert de keel in geval van pijn, irritatie, een branderig gevoel en problemen met slikken. Physiomer® Keelspray is een natuurlijk alternatief dat de ontzwellende eigenschappen van zeeewater combineert met de verzachtende kwaliteiten van honing en propolis en de essentiële oliën van Tijm linalol, Ravintsara en Wintergroen.

WAAROM PHYSIOMER® Keelspray GEBRUIKEN?

- Verzacht keelpijn; ontzwellt mechanisch en verzacht de zwelling in de keel door het osmotisch effect.
- Zuivert de keel door te helpen pathogenen (bacteriën en virussen) te verwijderen via het drainage-effect.
- Legt een verzachtende laag in de keel dankzij propolisextract en honing, bekend om hun verzachtende eigenschappen.

HOE PHYSIOMER® Keelspray GEBRUIKEN?

Gebruikswijze

Orale toediening: 3 sprays, tot 6 keer per dag.
U kunt even last hebben van een tintelend gevoel bij gevoeligheid of irritatie.
Neem contact op met een arts voordat u de spray gebruikt na een operatie of letsel.
Als de symptomen langer dan 10 dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Als dit product wordt gebruikt door meer dan één persoon, kan de infectie zich verspreiden.
Gebruik het product niet meer na de vervaldatum vermeld op de verpakking.
Gebruik dit product niet meer als de verpakking er niet meer als origineel uitziet.
Gebruik het product niet als het gebroken of beschadigd is.



Te gebruiken binnen de 6 maanden na de eerste spray.



Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

PHYSIOMER® Keelspray mag niet gebruikt worden:

- als u allergisch bent voor één van de ingrediënten;
- tijdens de zwangerschap of de borstvoeding;



- bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruik:

1. Schud de fles vóór gebruik.
 2. Verwijder het beschermkapje door het naar voren te trekken.
 3. Duw kort en krachtig en herhaal totdat een eerste verneveling wordt bekomen.
 4. Spray 3 maal achteraan in de keel.
- Maak het uiteinde na elk gebruik proper met warm water en droog goed af. Plaats het beschermkapje terug.
Om hygiënische redenen, gebruik 1 spray per persoon.

SAMENSTELLING:

Hypertonisch zeeewater 2,2 % totale zouten, plantaardige glycerine, acaciahoning, propolisextract. Hulpstoffen: natuurlijke munt, ORGANISCHE essentiële oliën van Tijm linalol, Ravintsara en Wintergroen. Natuurlijk citroenaroma.

Medisch hulpmiddel.

Laatste herziening: november 2018


Verdelers:
Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26,
BE-9810 Nazareth



Laboratoire de la Mer, ZAC de la Madeleine,
Avenue du Général Patton,
35400 Saint-Malo - France

20 ml

140

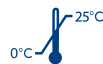

PHYSIOMER® SPRAY POUR LA GORGE action en 3 minutes.

Adultes et enfants de plus de 6 ans.
- Soulage les maux de gorge
- Aide à éliminer les bactéries et virus
- Adoucit la gorge
À l'eau de mer, à la propolis et aux huiles essentielles.
Goût miel & citron.

Veillez lire attentivement la notice avant d'utiliser le Spray mal de gorge **PHYSIOMER®**.
Vous y trouverez des informations importantes pour votre traitement.
- Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin pour un usage ultérieur.
- Pour toute question, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent au-delà de 10 jours, consultez votre médecin.

L'exposition de la zone pharyngée à des facteurs infectieux tels que virus ou bactéries peut entraîner une inflammation de la gorge, la rendre douloureuse et provoquer une pharyngite (inflammation du pharynx) ou une angine (inflammation des amygdales). Cette réaction inflammatoire est caractérisée par un afflux de fluides et de cellules immunitaires qui provoque le gonflement de la muqueuse à l'origine des manifestations du mal de gorge.

QU'EST-CE QUE LE PHYSIOMER® Spray pour la gorge?

Le Spray pour la gorge Physiomer® soulage, adoucit et purifie la gorge en cas de douleur, d'irritation, de sensation de brûlure et de problèmes de déglutition. Le Spray pour la gorge Physiomer® est une alternative naturelle qui combine les caractéristiques décongestionnantes de l'eau de mer et les caractéristiques adoucissantes du miel et de la propolis, et les huiles essentielles de Thym à linalol, de Ravintsara et de Gaulthérie.

POURQUOI UTILISER LE PHYSIOMER® Spray pour la gorge?

- Adoucit le mal de gorge; décongestionne mécaniquement et adoucit les gonflements dans la gorge grâce à l'effet osmotique.
- Purifie la gorge en aidant à éliminer les pathogènes (bactéries et virus) par l'effet de drainage.
- Dépose une couche qui adoucit dans la gorge grâce à l'extrait de propolis et au miel, connus pour leurs caractéristiques adoucissantes.

COMMENT UTILISER LE SPRAY PHYSIOMER® Spray pour la gorge?

Instructions pour utilisation

Administration orale: 3 pulvérisations, max. 6 fois par jour.
Vous pouvez souffrir un moment d'une sensation de picotement en cas de sensibilité ou d'irritation.
Prenez contact avec un médecin avant d'utiliser le spray après une opération ou une blessure.

Si les symptômes perdurent au-delà de 10 jours, consultez votre médecin.
Si ce produit est utilisé par plus d'une personne, l'infection peut se répandre.
N'utilisez plus le produit après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.
N'utilisez plus ce produit si l'emballage ne semble plus être celui d'origine.
N'utilisez plus le produit s'il est cassé ou endommagé.



Ne pas utiliser plus de 6 mois après la première vaporisation.



Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser le Spray pour la gorge PHYSIOMER®:

- en cas d'allergie à l'un des composants;
- chez la femme enceinte ou allaitante;
- chez l'enfant de moins de 6 ans.



- chez l'enfant de moins de 6 ans.

Mode et voie d'administration:

1. Secouer le flacon avant utilisation.
 2. Retirer le capuchon protecteur en le tirant vers l'avant.
 3. Exercer plusieurs pressions consécutives jusqu'à obtention du premier spray.
 4. Réaliser 3 pulvérisations vers le fond de gorge.
- Rincer l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation et le sécher.
Remplacez le capuchon protecteur.
Par mesure d'hygiène, utiliser un seul dispositif par personne.

COMPOSITION:

Eau de mer hypertonique 2,2 % des sels totaux, glycérine végétale, miel d'acacia, extrait de propolis. Excipients: menthe naturelle, huiles essentielles ORGANIQUES de Thym à linalol, Ravintsara et Gaulthérie. Arôme naturel de citron.

Dispositif médical.


Dernière révision: novembre 2018

Distributeur/Vertrieb:

Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26,
BE-9810 Nazareth

20 ml

140

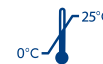

PHYSIOMER® HALSSPRAY wirkt schnell (3 Minuten).

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.
- Lindert Halsschmerzen
- Hilft bei der Beseitigung von Viren und Bakterien
- Beruhigt den Hals
Mit Meerwasser, Propolis und ätherischen Ölen.
Honig- & Zitronengeschmack.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage des **PHYSIOMER® Halssprays** sorgfältig durch.

Die Packungsbeilage enthält wichtige Informationen über Ihre Behandlung.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht benötigen Sie sie später noch.
- Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn die Symptome sich verschlechtern oder länger als 10 Tage andauern.

Wenn der Hals Infektionsquellen wie Viren oder Bakterien ausgesetzt wird, kann dies zu schmerzhaften Entzündungen wie Pharyngitis (Entzündung des Rachenraums) oder Tonsillitis (Entzündung der Mandeln) führen. Die Entzündungsreaktion zeichnet sich durch eine Zunahme von Flüssigkeiten und Immunzellen in der Schleimhaut aus. Die Immunzellen lösen eine Schwellung der Schleimhaut aus und verursachen die Symptome von Halsschmerzen.

WAS IST PHYSIOMER® Halsspray?

Physiomer® Halsspray lindert Halsschmerzen, beruhigt und reinigt den Hals bei Schmerzen, Reizung, Brennen und Schluckbeschwerden. Physiomer® Halsspray ist eine natürliche Alternative, die die abschwellenden Eigenschaften des Meerwassers mit der beruhigenden Wirkung von Honig und Propolis sowie den ätherischen Ölen von Thymian Linalol, Ravintsara und Wintergrün kombiniert.

WARUM PHYSIOMER® Halsspray VERWENDEN?

- Lindert Halsschmerzen: Wirkt abschwellend und beruhigt Entzündungen im Hals durch osmotische Wirkung.
- Reinigt den Hals durch Hilfe bei der Beseitigung von Krankheitserregern (Bakterien und Viren) dank Drainageeffekt.
- Hinterlässt eine beruhigende Schicht aus Propolisextrakt und Honig im Hals, die für ihre beruhigenden Eigenschaften bekannt sind.

WIE WIRD PHYSIOMER® Halsspray ANGEWENDET?

Gebrauchsanweisung

Orale Einnahme: 3 Sprühstöße, bis 6 Mal pro Tag.
Bei Empfindlichkeit oder Reizung kann es zu einem vorübergehenden Kribbeln kommen.
Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Spray nach einer Operation oder Verletzung verwenden.

Wenn die Symptome nach mehr als 10 Tagen anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt. Die Verwendung durch mehr als eine Person kann Infektionen verbreiten.
Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwenden.
Nicht verwenden, wenn die Verpackung ihr ursprüngliches Aussehen verloren hat.
Verwenden Sie kein zerbrochenes oder beschädigtes Produkt.



Nach dem ersten Sprühstoß innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.



Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

PHYSIOMER® Halsspray darf in folgenden Fällen nicht angewendet werden:

- wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt;
- während der Schwangerschaft oder Stillzeit;
- bei Kindern unter 6 Jahren.



Gebrauchsanweisung:

1. Schütteln Sie die Flasche vor dem Gebrauch.
 2. Entfernen Sie die Schutzkappe, indem Sie sie nach vorne ziehen.
 3. Kurz und kräftig drücken und wiederholen, bis die erste Zerstäubung sichtbar wird.
 4. 3 mal in den hinteren Teil des Halses sprühen.
- Das Ende nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser reinigen und gut trocknen.
Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.
Aus hygienischen Gründen 1 Spray pro Person verwenden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Hypertonisches Meerwasser mit 2,2 % Gesamtsalzen, pflanzliches Glycerin, Akazienhonig, Propolisextrakt. Hilfsstoffe: Natürliches Minzextrakt, ORGANISCHE ätherische Öle von Thymian Linalol, Ravintsara und Wintergrün. Natürliches Zitronenaroma.

Medizinprodukt. Δ 1904
CNOT1232
LF21598A
Letzte Überarbeitung: November 2018



Laboratoire de la Mer, ZAC de la Madeleine,
Avenue du Général Patton,
35400 Saint-Malo - France